



PRODUCTS CATALOGUE  
CATALOGUE DE PRODUITS  
CATALOGO PRODOTTI



**EVERmed**  
MEDICAL REFRIGERATION 



# index • index • indice

Green technology  
Technologie verte  
Tecnologia pulita

p. 4

Focus on design  
Attention au détail  
Dettagli di stile

p. 6

Standard control panel  
Panneau de contrôle standard  
Pannello di controllo standard

p. 8

xPRO control panel  
Panneau de contrôle xPRO  
Pannello di controllo xPRO

p. 10

Data collection solutions  
Solutions collecte données  
Soluzioni raccolta dati

p. 12

Alarm alert system  
Système de communication alarmes  
Sistema di comunicazione allarmi

p. 13

Refrigerators  
Réfrigérateurs  
Frigoriferi

p. 14

Freezers  
Congélateurs  
Congelatori

p. 20

2 Temperatures  
2 Températures  
2 Temperature

p. 30

Incubators  
Incubateurs  
Incubatori

p. 36

Portable refrigerators-freezers  
Réfrigérateurs-congélateurs portables  
Frigoriferi-congelatori portatili

p. 38

Ice Makers  
Machines à glace  
Produttori di ghiaccio

p. 42

Mortuary items  
Equipement mortuaire  
Articoli mortuari

p. 44

Big storage  
Stockage grande capacité  
Grande stoccaggio

p. 47






**Recycling as start of a development ecologically sustainable:** Our cabinets are 95% recyclable  
**Le recyclage comme base de développement écologiquement durable:** Nos armoires sont recyclables à 95%  
**Il riciclaggio come base di sviluppo ecosostenibile:** I nostri armadi sono riciclabili al 95%



**Care for the environment and the atmosphere:** We use environment-friendly refrigerants and polyurethane foam  
**Soin de l'environnement et de l'atmosphère:** Nous utilisons des gaz réfrigérants et polyuréthanes écologiques  
**Rispetto dell'ambiente e dell'atmosfera:** Utilizziamo gas refrigeranti e poliuretani ecologici



**Low energy consumption:** Thanks to the thicker insulation, to the high efficiency of the cooling units and to the use of LED internal lightings (glass door cabinets)  
**Consommation énergétique réduite:** Grâce à l'épaisseur d'isolation augmentée, à l'haute efficacité des systèmes de refroidissements et à l'utilisation de l'éclairage LED (armoires à portes vitrées)  
**Bassi consumi energetici:** Grazie agli spessori di isolamento maggiorati, all'alta efficienza degli impianti refrigeranti ed all'utilizzo di illuminazione a LED (armadi porta a vetro)

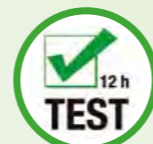

**Quality and operation guarantee:** Through accurate electric and pressure tests as well as through a functional testing lasting at least 12 h  
**Garantie de qualité et fonctionnement:** Par les biais de tests électriques et de pression rigoureux et à un contrôle fonctionnel d'au moins 12 h  
**Garanzia di qualità e funzionamento:** Ottenuti con accurati test elettrici e di pressione oltre che da un collaudo funzionale di almeno 12 ore



**Reduced functioning costs:** Thanks to the reduction of the energy consumption, till a 40% respect an equivalent model  
**Couts d'exploitation réduits:** Grâce à la réduction de la consommation d'énergie, jusqu'à 40% par rapport à un modèle équivalent  
**Ridotti costi di funzionamento:** Grazie alla riduzione dei consumi energetici, fino al 40% rispetto ad un equivalente modello



**Manufactured respecting the environment:** Thanks to the fitting of solar panels to our production plant, all the production stages only use green energy from renewable sources  
**Fabriqués respectant l'environnement:** Grâce à l'introduction de panneaux solaires dans l'usine de production, toutes les étapes de transformation utilisent de l'énergie propre à partir de sources renouvelables  
**Prodotti rispettando l'ambiente:** Grazie all'introduzione di pannelli solari nello stabilimento produttivo, tutte le fasi di lavorazione fanno uso di energia pulita proveniente da fonti rinnovabili



**Easy maintenance:** With cooling unit ceiling type with monoblock mounting for an easy replacement\*  
**Facilité d'entretien:** Avec unités de refroidissement à plafond pour un remplacement aisé\*  
**Facilità di manutenzione:** Con unità refrigeranti a soffitto tipo monoblocco per una facile sostituzione\*

\* Present on selected models \* Pour certains modèles \* Per alcuni modelli

## FOCUS ON DESIGN ATTENTION AU DÉTAIL • DETTAGLI DI STILE

- 2 finishing: White or Stainless steel
- 2 versions: Blanc ou Acier Inox
- 2 finiture: Bianco o Acciaio Inox

- Modular stainless steel drawers, with different using possibilities with or without inner dividers
- Tiroirs en acier INOX modulaires, pour solutions d'utilisation différentes avec ou sans diviseurs amovibles
- Cassetti in acciaio INOX modulari, per diverse soluzioni di utilizzo con o senza divisorie mobili

- High insulation thickness from 50 to 75 mm
- Épaisseur d'isolation augmentée de 50 à 75 mm
- Spessore di isolamento maggiorato da 50 a 75 mm

- Rounded internal corners to make easy the cleaning operations and tray-type moulded inner bottom to contain spills
- Coins intérieurs arrondis pour un nettoyage aisé et fond interne moulé à vasque pour contenir les éventuels liquides
- Angoli interni arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia e fondo interno stampato a vasca per la raccolta di eventuali perdite di liquidi

- Choice between 2 temperature controllers: standard or xPRO
- Choix entre 2 régulateurs de température: standard ou xPRO
- Scelta tra 2 regolatori di temperatura: standard o xPRO

- Removable magnetic rubber door gaskets
- Joints de porte sur 4 cotés, de type magnétique, montés à encastrement pour un remplacement aisé
- Guarnizioni porte perimetrali, di tipo magnetico, montate ad incastro di facile sostituzione

- Shelves and drawers mounted on anti-tilt slides allowing the extraction
- Clayettes et tiroirs montés sur glissières anti-renversement, qui permettent l'extraction
- Ripiani e cassetti montati su guide anti-ribaltamento, che consentono l'estrazione

- Triple layer glass doors with integrated full-height handle
- Portes vitrées à triple cristal avec poignée "toute hauteur" intégrée
- Porte a vetro con triplo cristallo con maniglia "tutta-altezza" integrata

Some of the mentioned features may be present only on selected models.  
Certains caractéristiques pourraient être disponibles sur quelque modèle seulement.  
Alcune delle caratteristiche potrebbero essere disponibili solo su alcuni modelli.

75  
mm

## STANDARD CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE STANDARD • PANNELLO DI CONTROLLO STANDARD



- Wide, back-lit LED display showing the internal temperature
  - Soft touch-pads buttons
  - Display resolution 0,1°C
  - Enlightened icons showing the functioning status
  - Visual and acoustic alarm signalling for high and low temperatures, door ajar, power failure (when power restored), anti-freezing and sensors failure
  - Safety buttons locking with manual activation
  - Internal calendar and clock for easier traceability of the alarms
  - Internal memory for the latest 10 alarm conditions
  - Potential free contact for alarm signal remoting
- Grand écran retro-éclairé à LED pour l'affichage de la température interne
  - Touches à membrane
  - Résolution d'affichage de 0,1°C
  - Icones éclairées pour l'affichage des états de fonctionnement
  - Signalisation acoustique et visuelle des alarmes pour haute et basse température, porte ouverte, coupure courant (au rétablissement), anti-congélation et sondes en panne
  - Verrouillage manuel du clavier de sécurité
  - Horloge et calendrier pour une simple traçabilité des alarmes
  - Mémoire intégrée des 10 dernières conditions d'alarme
  - Contact sec pour le renvoi du signal d'alarme
- Grande display retro-illuminato a LED a visualizzazione temperatura interna
  - Pulsanti a membrana
  - Risoluzione visualizzazione 0,1°C
  - Icone illuminate a visualizzazione stati di funzionamento
  - Segnalazione allarme, sia acustica che visiva, per alta e bassa temperatura, porta aperta, mancanza tensione (al ripristino), anti-congelamento e sonda guaste
  - Blocco tastiera di sicurezza manuale
  - Orologio e calendario interni per una semplice tracciabilità degli allarmi
  - Memoria interna per le ultime 10 condizioni di allarme
  - Contatto secco per remotizzazione allarmi

2 choices for the temperature control **STANDARD** or **xPRO**  
2 choix pour le contrôle de la température **STANDARD** ou **xPRO**  
2 scelte per il controllo della temperatura **STANDARD** o **xPRO**

## xPRO CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE xPRO • PANNELLO DI CONTROLLO xPRO



- Wide, 3,5" high resolution, colour TFT display, with capacitive touch-buttons, showing the internal temperature, functioning status and settings
- Back-up battery, having automatic recharge, for functioning even in case of power failures
- Pt1000 sensors
- New, intuitive EEN (EVERmed Easy Navigation) interface for easy surfing through the menus
- Full personalization possibilities of functions and settings according to the needs
- Dual-level safety access, with individual and customizable PIN codes for menu and ON/OFF buttons
- Display resolution 0,1°C
- Automatic test facilities for temperature alarms and functioning status
- Visual and acoustic alarm signalling for 8 different alarm conditions (high and low temperatures, door ajar, power failure, anti-freezing, battery discharged, dirty condenser and sensors failure)
- Muting facilities for the acoustic alarms with programmable reactivation
- Programmable automatic safety button protection
- Selection of ventilation mode
- Graphical displaying of the temperature trend for the latest 52 working hours
- Internal calendar and clock for easier alarms traceability
- Internal memory for the latest 30 alarm conditions with clear written indications about type of alarm, duration and high or low temperatures achieved (where applicable)
  - Door openings memory log for the latest 30 days
  - Potential free contact for alarm signal remoting
  - Upgradeable software
  - Customization possibilities with extra sensor for product simulation and USB port for downloading of functioning details (optionally available)

- Grand affichage de 3,5" à couleurs TFT à haute résolution avec touches capacitives pour l'affichage de la température réelle, des états de fonctionnement et du réglage
- Batterie tampon, à recharge automatique, pour fonctionnement en cas de coupure courant
- Sondes Pt1000
- Interface nouvelle et intuitive EEN (EVERmed Easy Navigation) pour une navigation simple dans le menu
- Large éventail de personnalisation, en terme de fonctions et réglages, en raison des besoins d'utilisation
- Access à double niveau de sécurité, pour menu et touche ON/OFF, avec mots de passe individuels et personnalisables.
- Résolution d'affichage de 0,1°C
- Tests automatiques pour alarmes de température et états de fonctionnement
- Signalisation acoustique et visuelle pour 8 différents conditions d'alarme (haute et basse température, porte ouverte, coupure de courant, anti-congélation, batterie faible, condensateur colmaté et sondes en panne)
- Possibilité de désactiver la signalisation acoustique des alarmes avec réactivation automatique programmable
- Verrouillage clavier de sécurité automatique et programmable
- Possibilité de sélectionner la typologie de ventilation
- Affichage graphique de la tendance température pendant les 52 dernières heures
- Horloge et calendrier pour une simple traçabilité des alarmes
- Mémoire intégrée pour les 30 dernières conditions d'alarme avec indications claires du type d'alarme, de la durée, des températures maximales et minimales atteintes
- Mémoire intégrée des ouvertures portes des 30 derniers jours
- Contact sec pour le renvoi des alarmes
- Logiciel évolutif
- Disponibles sur demande, sonde simulation produit et port USB pour téléchargement données

- Grande display da 3,5" a colori TFT ad alta risoluzione, con pulsanti capacitivi touch, visualizzazione temperatura reale, stati di funzionamento ed impostazioni
- Batteria di back-up, a ricarica automatica, per funzionamento anche in caso di mancanza tensione
- Sonda Pt1000
- Navigazione nel menu con nuova ed intuitiva interfaccia EEN (EVERmed Easy Navigation)
- Ampia interattività per personalizzazione di funzioni e settaggi secondo le necessità di utilizzo
- Accesso a doppio livello di sicurezza, per menu e pulsante accensione, con password individuali e personalizzabili
- Risoluzione visualizzazione 0,1°C
- Test automatici per allarmi temperatura e stato di funzionamento
- Segnalazione allarmi, sia acustici che visivi, per 8 diverse condizioni di allarme (alta e bassa temperatura, porta aperta, mancanza tensione, anti-congelamento, batteria scarica, condensatore sporco e sonde guaste)
- Silenziamento allarmi acustici con riattivazione automatica programmabile
- Blocco tastiera di sicurezza automatico e programmabile
- Ventilazione interna regolabile
- Visualizzazione grafica andamento temperatura delle ultime 52 ore di funzionamento
- Orologio e calendario interni per una semplice tracciabilità degli allarmi
- Memoria interna per le ultime 30 condizioni di allarme con indicazione tipo di allarme, durata e temperature massime o minime raggiunte (se applicabile)
- Memoria interna per traffico porte degli ultimi 30 giorni
- Contatto secco per remotizzazione allarmi
- Software aggiornabile con release
- Disponibili su richiesta, sonda simulazione prodotto e porta USB per scarico dati

**USB Port - Port USB - Porta USB**

- Data-logging of all functioning conditions of the appliance
  - Selectable downloading data directly through a dedicated menu in the xPRO controller
  - Download of Excel data sheets suitable for Windows PC, no specific software and/or training needed
  - Programmable sampling time
  - Up to 129,000 recordings in the internal memory
- Enregistrement données de toutes les conditions de fonctionnement de l'appareil
  - Possibilité de sélectionner les données à télécharger directement par le menu du régulateur xPRO
  - Téléchargement de feuilles Excel utilisables, sans logiciels ou training spécifiques, par les PC à système Windows
  - Temps de détection programmable
  - Mémoire interne jusqu'à 129.000 enregistrements
- Registrazione dati di tutte condizioni di funzionamento dell'apparecchio
  - Possibilità di selezionare i dati da scaricare direttamente dal menu del regolatore xPRO
  - Download di fogli Excel utilizzabili da PC Windows, senza necessità di software e/o training specifici
  - Tempo campionamenti programmabile
  - Memoria interna fino a 129.000 registrazioni



**Temperature chart recorder - Enregistreur graphique - Registratore grafico**

- Temperature trend traced on round paper chart
  - 24 hours or 7 days recording
  - Battery operating for functioning even in case of power failures
  - Independent recording thanks its-own sensor
  - Perspex cover with safety lock
- Tendance de la température sur diagrammes circulaires hebdomadaires
  - Enregistrements sur 24 heures ou 7 jours
  - Fonctionnement à batterie pour en garantir le fonctionnement en cas de coupure de courant
  - Détection de la température indépendante grâce à une sonde dédiée
  - Protégé par un panneau en plexiglas transparent doté de clé de sécurité
- Tracciato temperatura su carta diagrammata circolare
  - Registrazione giornaliera o settimanale
  - Batteria di back-up, per funzionamento anche in caso di mancanza tensione
  - Sonda integrata per una rilevazione indipendente delle temperature
  - Sportello in plexiglass trasparente con chiave di sicurezza



**GSM/GPRS telephone dialer - Numéroteur téléphonique GSM/GPRS  
Combinatore telefonico GSM/GPRS**

- Intuitive graphical interface on 2,8" colour touch-screen display
  - Equipped with integrated independent battery with automatic recharge
  - Suitable to connect up to 6 different appliances through the NO/NC contact
  - In case of alarm it sends an alert SMS or a phone call up to 1000 pre-programmed phone numbers
  - Password protected to avoid tampering and misuse
  - It alerts automatically while the SIM card credit is going to terminate
- Interface graphique intuitive sur écran tactile à couleur de 2,8"
  - Equipé de batterie indépendante intégrée à recharge automatique
  - Conçu pour connecter jusqu'à 6 appareils via le contact sec
  - En cas d'alarme il transmet un SMS d'alerte ou un coup de fil jusqu'à 1000 numéros de téléphone préprogrammés
  - Protégé par mot de passe pour éviter toute altération ou utilisation impropre
  - Il transmet automatiquement un SMS d'alerte pour crédit insuffisant
- Interfaccia grafica intuitiva su display touch-screen a colori da 2,8"
  - Dotato di batteria indipendente integrata a ricarica automatica
  - Concepito per collegare fino a 6 apparecchi diversi attraverso il contatto secco
  - In caso di allarme invia un SMS di allerta o effettua una chiamata fino a 1000 numeri telefonici pre-impostati
  - Protetto da codice di sicurezza programmabile per prevenire manomissioni o uso improprio
  - Trasmette automaticamente un SMS di avviso per credito insufficiente



# MPR

+2°C  
+15°C



## Refrigerators MPR range:

- 2 versions, steel epoxy coated white colour or stainless steel
- 12 models with capacities from 110 to 2100 litres
- triple layers glass doors with full-height handle
- 2 levels for the control, standard and xPRO
- internal fitting with open wire shelves and mix-up possibility shelves-drawers
- LED internal lighting
- forced-air refrigeration
- automatic defrost with evaporation of condensate water

## Réfrigérateurs série MPR:

- 2 versions, tôle d'acier plastifiée blanche ou acier INOX
- 12 modèles, disponibles avec capacités de 110 à 2100 litres
- portes vitrées à triple cristal avec poignée toute hauteur
- 2 niveaux de contrôle, standard et xPRO
- équipement intérieur à clayettes en fil et possibilité de combiner clayettes-tiroirs
- éclairage à LED
- réfrigération ventilée
- dégivrage automatique avec évaporation condensats

## MEDICAL-PHARMACEUTICAL REFRIGERATORS RÉFRIGÉRATEURS MÉDICAUX ET POUR PHARMACIE FRIGORIFERI PER USO MEDICALE E FARMACEUTICO

## Frigoriferi serie MPR:

- 2 versioni, lamiera d'acciaio plastificata bianca o acciaio INOX
- 12 modelli, disponibili con capacità da 110 a 2100 litri
- porte vetrate a triplo cristallo con maniglia tutta altezza
- 2 livelli di controllo, standard e xPRO
- dotazione interna a ripiani grigliati e possibilità di combinare ripiani-cassetti
- illuminazione a LED
- refrigerazione ventilata
- sbrinamento automatico con evaporazione condensa



MPR 110V



MPR 110H



MPR 130



MPR 270/370



MPR 440/530/625



MPR 925/1160/1365



MPR 2100



LR

0°C  
+15°C

 **Refrigerators LR range:**

- 2 versions, steel epoxy coated white colour or stainless steel
- 10 models with capacities from 130 to 2100 litres
- solid doors realized with the same insulation and material as the structure
- 2 levels for the control, standard and xPRO
- internal fitting with open wire shelves and mix-up possibility shelves-drawers
- automatic defrost with evaporation of condensate water
- internal lighting
- forced-air refrigeration

 **Réfrigérateurs série LR:**

- 2 versions, tôle d'acier plastifiée blanche ou acier INOX
- 10 modèles, disponibles avec capacités de 130 à 2100 litres
- portes pleines, réalisées avec le même matériel de la structure
- 2 niveaux de contrôle, standard et xPRO
- équipement intérieur à clayettes en fil et possibilité de combiner clayettes-tiroirs
- dégivrage automatique avec évaporation condensats
- éclairage intérieur
- réfrigération ventilée

**LABORATORY REFRIGERATORS  
RÉFRIGÉRATEURS DE LABORATOIRE  
FRIGORIFERI PER LABORATORIO**

 **Frigoriferi serie LR:**

- 2 versioni, lamiera d'acciaio plastificata bianca o acciaio INOX
- 10 modelli, disponibili con capacità da 130 a 2100 litri
- porte isolate, realizzate con lo stesso materiale della struttura
- 2 livelli di controllo, standard e xPRO
- dotazione interna a ripiani grigliati e possibilità di combinare ripiani-cassetti
- sbrinamento automatico con evaporazione condensa
- illuminazione interna
- refrigerazione ventilata



LR 130



LR 270



LR 370/440/530/625



LR 925/1160/1365



LR 2100

# BBR

+4°C



## Blood bank refrigerators BBR range:

- 2 versions, steel epoxy coated white colour or stainless steel
- 11 models with capacities from 110 to 1365 litres
- triple layers glass doors with full-height handle
- xPRO control panel and temperature chart recorder
- internal fitting with stainless steel drawers provided with dividers
- LED internal lighting
- forced-air refrigeration
- automatic defrost with evaporation of condensate water

## Banques de sang série BBR:

- 2 versions, tôle d'acier plastifiée blanche ou acier INOX
- 11 modèles, disponibles avec capacités de 110 à 1365 litres
- portes vitrées à triple cristal avec poignée toute hauteur
- panneau de contrôle xPRO et enregistreur graphique de température
- équipement intérieur à tiroirs en acier INOX avec séparateurs
- éclairage à LED
- réfrigération ventilée
- dégivrage automatique avec évaporation condensats

## BLOOD BANK REFRIGERATORS BANQUES DE SANG FRIGO-EMOTECHE

## Frigo-emoteche serie BBR:

- 2 versioni, lamiera d'acciaio plastificata bianca o acciaio INOX
- 11 modelli, disponibili con capacità da 110 a 1365 litri
- porte vetrate a triplo cristallo con maniglia tutta altezza
- controllo xPRO e registratore grafico di temperatura
- dotazione interna a cassetti in acciaio INOX con divisorie
- illuminazione a LED
- refrigerazione ventilata
- sbrinamento automatico con evaporazione condensa



BBR 110V



BBR 110H



BBR 130



BBR 270/370



BBR 440/530/625



BBR 925/1160/1365

# LFG

-5°C  
-20°C



## Upright freezers LFG range:

- 2 versions, steel epoxy coated white colour or stainless steel
- 4 models with capacities from 530 to 1365 litres
- triple layers glass doors with full-height handle and anti-fog heating film
- 2 levels for the controls, standard and xPRO
- internal fitting with open wire shelves and mix-up possibility shelves-drawers
- LED internal lighting
- forced-air refrigeration
- automatic defrost with evaporation of condensate water

## Congélateurs verticaux série LFG:

- 2 versions, tôle d'acier plastifiée blanche ou acier INOX
- 4 modèles, disponibles avec capacités de 530 à 1365 litres
- portes vitrées à triple cristal avec poignée toute hauteur et résistance anti-condensat
- 2 niveaux de contrôle, standard et xPRO
- équipement intérieur à clayettes en fil et possibilité de combiner clayettes-tiroirs
- éclairage à LED
- réfrigération ventilée
- dégivrage automatique avec évaporation condensats



LFG 530



LFG 625



LFG 1160



LFG 1365

## LABORATORY FREEZERS GLASS DOOR CONGÉLATEURS DE LABORATOIRE À PORTE VITRÉE CONGELATORI PORTA A VETRO PER LABORATORIO

## Congelatori verticali serie LFG:

- 2 versioni, lamiera d'acciaio plastificata bianca o acciaio INOX
- 4 modelli, disponibili con capacità da 530 a 1365 litri
- porte vetrate a triplo cristallo con maniglia tutta altezza e resistenza anti-appannante
- 2 livelli di controllo, standard e xPRO
- dotazione interna a ripiani grigliati e possibilità di combinare ripiani-cassetti
- illuminazione a LED
- refrigerazione ventilata
- sbrinamento automatico con evaporazione condensa



MDD  
93/42/EEC  
CLASS IIa

CLASS IIa



LF

-5°C  
-20°C  
~  
-25°C

 **Upright freezers LF range:**

- 2 versions, steel epoxy coated white colour or stainless steel
- 10 models with capacities from 130 to 2100 litres
- solid doors realized with the same insulation and material as the structure
- 2 levels for the control, standard and xPRO
- internal fitting with open wire shelves and mix-up possibility shelves-drawers
- automatic defrost with evaporation of condensate water
- internal lighting
- forced-air refrigeration
- temperature until -25°C (-20°C in some models)

 **Congélateurs verticaux série LF:**

- 2 versions, tôle d'acier plastifiée blanche ou acier INOX
- 10 modèles, disponibles avec capacités de 130 à 2100 litres
- portes pleines, réalisées avec le même matériel de la structure
- 2 niveaux de contrôle, standard et xPRO
- équipement intérieur à clayettes en fil et possibilité de combiner clayettes-tiroirs
- dégivrage automatique avec évaporation condensats
- éclairage intérieur
- réfrigération ventilée
- température jusqu'à -25°C (-20°C pour certains modèles)



**LABORATORY FREEZERS  
CONGÉLATEURS DE LABORATOIRE  
CONGELATORI PER LABORATORIO**

 **Congelatori verticali serie LF:**

- 2 versioni, lamiera d'acciaio plastificata bianca o acciaio INOX
- 10 modelli, disponibili con capacità da 130 a 2100 litri
- porte isolate, realizzate con lo stesso materiale della struttura
- 2 livelli di controllo, standard e xPRO
- dotazione interna a ripiani grigliati e possibilità di combinare ripiani-cassetti
- sbrinamento automatico con evaporazione condensa
- illuminazione interna
- refrigerazione ventilata
- temperatura fino a -25°C



LF 130



LF 270



LF 370/440/530/625



LF 925/1160/1365



LF 2100

# LDF

270/370/440/530/625  
925/1160/1365



-15°C  
-30°C

## LABORATORY DEEP FREEZERS CONGÉLATEURS DE LABORATOIRE CONGELATORI PER LABORATORIO

### Upright deep freezers LDF range:

- 2 versions, steel epoxy coated white colour or stainless steel
- 8 models with capacities from 270 to 1365 litres
- solid doors realized with the same insulation and material as the structure
- 2 levels for the control, standard and xPRO
- internal fitting with open wire shelves and mix-up possibility shelves-drawers
- internal lighting
- forced-air refrigeration
- automatic defrost with evaporation of condensate water
- temperature until -30°C

### Congélateurs verticaux série LDF:

- 2 versions, tôle d'acier plastifiée blanche ou acier INOX
- 8 modèles, disponibles avec capacités de 270 à 1365 litres
- portes pleines, réalisées avec le même matériel de la structure
- 2 niveaux de contrôle, standard et xPRO
- équipement intérieur à clayettes en fil et possibilité de combiner clayettes-tiroirs
- éclairage intérieur
- réfrigération ventilée
- dégivrage automatique avec évaporation condensats
- température jusqu'à -30°C

### Congelatori verticali serie LDF:

- 2 versioni, lamiera d'acciaio plastificata bianca o acciaio INOX
- 8 modelli, disponibili con capacità da 270 a 1365 litri
- porte isolate, realizzate con lo stesso materiale della struttura
- 2 livelli di controllo, standard e xPRO
- dotazione interna a ripiani grigliati e possibilità di combinare ripiani-cassetti
- illuminazione interna
- refrigerazione ventilata
- sbrinamento automatico con evaporazione condensa
- temperatura fino a -30°C



LDF 270

## SUPER DEEP FREEZERS SUPER CONGÉLATEURS SUPER CONGELATORI

# PDF

270/370/440/530/625



-25°C  
-40°C

### Upright deep freezers PDF range:

- 2 versions, steel epoxy coated white colour or stainless steel
- 5 models with capacities from 270 to 625 litres
- solid doors realized with the same insulation and material as the structure
- 2 levels for the control, standard and xPRO
- internal fitting with open wire shelves and mix-up possibility shelves-drawers
- internal lighting
- forced-air refrigeration
- automatic defrost with evaporation of condensate water
- temperature until -40°C

### Congélateurs verticaux série PDF:

- 2 versions, tôle d'acier plastifiée blanche ou acier INOX
- 5 modèles, disponibles avec capacités de 270 à 625 litres
- portes pleines, réalisées avec le même matériel de la structure
- 2 niveaux de contrôle, standard et xPRO
- équipement intérieur à clayettes en fil et possibilité de combiner clayettes-tiroirs
- éclairage intérieur
- réfrigération ventilée
- dégivrage automatique avec évaporation condensats
- température jusqu'à -40°C

### Congelatori verticali serie PDF:

- 2 versioni, lamiera d'acciaio plastificata bianca o acciaio INOX
- 5 modelli, disponibili con capacità da 270 a 625 litri
- porte isolate, realizzate con lo stesso materiale della struttura
- 2 livelli di controllo, standard e xPRO
- dotazione interna a ripiani grigliati e possibilità di combinare ripiani-cassetti
- illuminazione interna
- refrigerazione ventilata
- sbrinamento automatico con evaporazione condensa
- temperatura fino a -40°C



PDF 370

# ULF

120/240/360/480  
600/710

-60°C  
-86°C

## ULTRA-LOW FREEZERS ULTRA-CONGÉLATEURS ULTRA CONGELATORI

### Upright ultra-low freezers ULF range:

- realized in steel epoxy coated outside and stainless steel inside
- 5 models with capacities from 120 to 710 litres
- solid doors realized with the same insulation and material as the structure and security key locking
- PRO2 control
- internal fitting with stainless steel shelves and inner-doors
- temperature until -86°C

### Ultra congélateurs verticaux série ULF:

- réalisés en tôle d'acier vernie et acier INOX à l'intérieur
- 5 modèles, disponibles avec capacités de 120 à 710 litres
- portes pleines, réalisées avec le même matériel de la structure et fermeture à clé
- contrôle PRO2
- équipement intérieur à clayettes en acier INOX et contre-portillons intérieurs
- température jusqu'à -86°C

### Ultra-congelatori verticali serie ULF:

- realizzati lamiera d'acciaio verniciata e acciaio INOX all'interno
- 5 modelli, disponibili con capacità da 120 a 710 litri
- porte isolate, realizzate con lo stesso materiale della struttura e chiusura a chiave
- controllo PRO2
- dotazione interna a ripiani in acciaio INOX e contro-sportelli interni
- temperatura fino a -86°C



ULF 240

## LABORATORY CHEST DEEP FREEZERS CONGÉLATEURS COFFRES DE LABORATOIRE CONGELATORI ORIZZONTALI PER LABORATORIO

# LCDF

120/220/320  
390/460

-20°C  
-45°C

### Chest deep freezers LCDF range:

- realized in steel epoxy coated white colour and aluminium inside
- 5 models with capacities from 120 to 460 litres
- counter-balanced insulated lid with security locking
- digital-electronic temperature control
- static refrigeration
- temperature until -45°C

### Congélateurs coffres série LCDF :

- réalisés en tôle d'acier plastifiée blanche et aluminium à l'intérieur
- 5 modèles, disponibles avec capacités de 120 à 460 litres
- couvercle isolé à ouverture compensée avec fermeture à clé
- régulation électronique-digitale de la température
- réfrigération statique
- température jusqu'à -45°C

### Congelatori orizzontali serie LCDF:

- realizzati in lamiera d'acciaio plastificata bianca e alluminio all'interno
- 5 modelli, disponibili con capacità da 120 a 460 litri
- coperchio isolato ad apertura compensata dotato di chiusura a chiave
- controllo elettronico-digitale della temperatura
- refrigerazione statica
- temperatura fino a -45°C



LCDF 220

LABORATORY CHEST SUPER DEEP FREEZERS  
 CONGÉLATEURS COFFRES DE LABORATOIRE  
 CONGELATORI ORIZZONTALI PER LABORATORIO

# LCSDF

120/220/320/390/460

-40°C  
 -60°C



LCSDF 320

 **Chest deep freezers LCSDF range:**

- realized in steel epoxy coated white colour both in- and outside
- 5 models with capacities from 120 to 460 litres
- counter-balanced insulated lid with security locking
- digital-electronic temperature control
- static refrigeration
- temperature until -60°C

 **Congélateurs coffres série LCSDF:**

- réalisés en tôle d'acier plastifiée blanche et aluminium à l'intérieur
- 5 modèles, disponibles avec capacités de 120 à 460 litres
- couvercle isolé à ouverture compensée avec fermeture à clé
- régulation électronique-digitale de la température
- réfrigération statique
- température jusqu'à -60°C

 **Congelatori orizzontali serie LCSDF:**

- realizzati in lamiera d'acciaio plastificata bianca sia all'interno che all'esterno
- 5 modelli, disponibili con capacità da 120 a 460 litri
- coperchio isolato ad apertura compensata dotato di chiusura a chiave
- controllo elettronico-digitale della temperatura
- refrigerazione statica
- temperatura fino a -60°C

ULTRA-LOW CHEST FREEZERS  
 ULTRA-CONGÉLATEURS COFFRES  
 ULTRA CONGELATORI ORIZZONTALI

# ULCF

400/570

-60°C  
 -86°C



ULCF 400

 **Chest ultra-low freezers ULCF range:**

- realized in steel epoxy coated outside and stainless steel inside
- 2 models with capacities from 400 to 570 litres
- counter-balanced insulated lid with security locking
- PRO2 control
- static refrigeration
- temperature until -86°C

 **Ultra congélateurs coffres série ULCF:**

- réalisés en tôle d'acier vernie et acier INOX à l'intérieur
- 2 modèles, disponibles avec capacités de 400 à 570 litres
- couvercle isolé à ouverture compensée et fermeture à clé
- contrôle PRO2
- réfrigération statique
- température jusqu'à -86°C

 **Ultra-congelatori orizzontali serie ULCF:**

- realizzati lamiera d'acciaio verniciata e acciaio INOX all'interno
- 2 modelli, disponibili con capacità da 400 a 570 litri
- coperchio isolato ad apertura compensata dotato di chiusura a chiave
- controllo PRO2
- refrigerazione statica
- temperatura fino a -86°C

# LCRR

0°C  
+15°C

0°C  
+15°C

## 🇬🇧 2-temperatures refrigerators LCRR range:

- realized in steel epoxy coated white colour or in stainless steel both in-and outside (according to the model)
- 7 models with capacities from 260 to 2100 litres
- 2 separate compartments, completely independent between them
- solid doors realized with the same insulation and material as the structure
- internal fitting with open wire shelves and mix-up possibility shelves-drawers
- 2 levels for the control, standard and xPRO
- automatic defrost with evaporation of condensate water
- internal lighting
- forced-air refrigeration

## 🇫🇷 Réfrigérateurs à 2 températures série LCRR:

- réalisés en tôle d'acier plastifiée blanche ou en acier INOX soit à l'intérieur que à l'extérieur (selon le modèle)
- 7 modèles, disponibles avec capacités de 260 à 2100 litres
- 2 compartiments séparés, complètement indépendants entre eux
- portes pleines, réalisées avec le même matériel de la structure
- équipement intérieur à clayettes en fil et possibilité de combiner clayettes-tiroirs
- 2 niveaux de contrôle, standard et xPRO
- dégivrage automatique avec évaporation condensats
- éclairage intérieur
- réfrigération ventilée



LCRR 260



LCRR 370 - 530



LCRR 625



LCRR 1160-1365



LCRR 2100

## LABORATORY COMBINATION REFRIGERATOR / REFRIGERATOR RÉFRIGÉRATEUR / RÉFRIGÉRATEUR DE LABORATOIRE COMBINATI FRIGORIFERO / FRIGORIFERO PER LABORATORIO

## 🇮🇹 Frigoriferi a 2 temperature serie LCRR:

- realizzati in lamiera d'acciaio plastificata bianca o acciaio INOX sia all'interno che all'esterno (in base al modello)
- 7 modelli, disponibili con capacità da 260 a 2100 litri
- 2 scomparti separati, completamente indipendenti tra loro
- porte isolate, realizzate con lo stesso materiale della struttura
- dotazione interna a ripiani grigliati e possibilità di combinare ripiani-cassetti
- 2 livelli di controllo, standard e xPRO
- sbrinamento automatico con evaporazione condensa
- illuminazione interna
- refrigerazione ventilata





# MPRR

+2°C  
+15°C

+2°C  
+15°C

## 🇬🇧 2-temperatures refrigerators MPRR range:

- realized in steel epoxy coated white colour both in-and outside
- 8 models with capacities from 260 to 2100 litres
- 2 separate compartments, completely independent between them
- triple layers glass doors with full-height handle
- 2 levels for the controls, standard and xPRO
- internal fitting with open wire shelves and mix-up possibility shelves-drawers
- LED internal lighting
- forced-air refrigeration
- automatic defrost with evaporation of condensate water

## 🇫🇷 Réfrigérateurs à 2 températures série MPRR:

- réalisés en tôle d'acier plastifiée blanche soit à l'intérieur que à l'extérieur
- 8 modèles, disponibles avec capacités de 260 à 2100 litres
- 2 compartiments séparés, complètement indépendants entre eux
- portes vitrées à triple cristal avec poignée toute hauteur
- 2 niveaux de contrôle, standard et xPRO
- équipement intérieur à clayettes en fil et possibilité de combiner clayettes-tiroirs
- éclairage intérieur à LED
- réfrigération ventilée
- dégivrage automatique avec évaporation condensats



MPRR 260



MPRR 370/530



MPRR 625



MPRR 925-1160-1365



MPRR 2100

## MEDICAL-PHARMACEUTICAL REFRIGERATOR / REFRIGERATOR RÉFRIGÉRATEUR / RÉFRIGÉRATEUR MÉDICAL ET POUR PHARMACIE FRIGORIFERO / FRIGORIFERO PER USO MEDICALE E FARMACEUTICO

## 🇮🇹 Frigoriferi a 2 temperature serie MPRR:

- realizzati in lamiera d'acciaio plastificata bianca sia all'esterno che all'interno
- 8 modelli, disponibili con capacità da 260 a 2100 litri
- 2 scomparti separati, completamente indipendenti tra loro
- porte vetrate a triplo cristallo con maniglia tutta altezza
- 2 livelli di controllo, standard e xPRO
- dotazione interna a ripiani grigliati e possibilità di combinare ripiani-cassetti
- illuminazione a LED
- refrigerazione ventilata
- sbrinamento automatico con evaporazione condensa



# LCRF

0°C  
+15°C

-5°C  
-20°C  
~  
-25°C




## Refrigerators/Freezers combination LCRF range:

- realized in steel epoxy coated white colour or in stainless steel both in-and outside (according to the model)
- 6 models with capacities from 370 to 2100 litres
- 2 separate compartments, completely independent between them
- solid doors realized with the same insulation and material as the structure
- 2 levels for the control, standard and xPRO
- internal fitting with open wire shelves and mix-up possibility shelves-drawers
- internal lighting
- forced-air refrigeration
- automatic defrost with evaporation of condensate water

## Réfrigérateurs/congérateurs combinés série LCRF:

- réalisés en tôle d'acier plastifiée blanche ou en acier INOX soit à l'intérieur que à l'extérieur (selon le modèle)
- 6 modèles, disponibles avec capacités de 370 à 2100 litres
- 2 compartiments séparés, complètement indépendants entre eux
- portes pleines, réalisées avec le même matériel de la structure
- 2 niveaux de contrôle, standard et xPRO
- équipement intérieur à clayettes en fil et possibilité de combiner clayettes-tiroirs
- éclairage intérieur
- réfrigération ventilée
- dégivrage automatique avec évaporation condensats

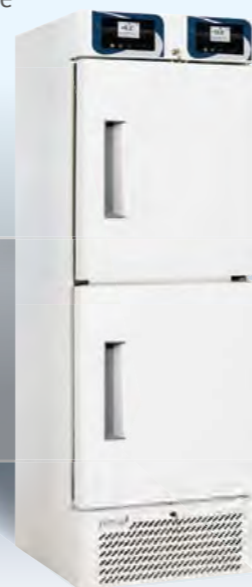

LCRF 370 - 530



LCRF 625



LCRF 1160-1365



LCRF 2100

## LABORATORY COMBINATION REFRIGERATOR / FREEZER RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR DE LABORATOIRE COMBINATI FRIGORIFERO / CONGELATORE PER LABORATORIO

## Frigo-congelatori serie LCRF:

- realizzati in lamiera d'acciaio plastificata bianca o acciaio INOX sia all'interno che all'esterno (in base al modello)
- 6 modelli, disponibili con capacità da 370 a 2100 litri
- 2 scomparti separati, completamente indipendenti tra loro
- porte isolate, realizzate con lo stesso materiale della struttura
- 2 livelli di controllo, standard e xPRO
- dotazione interna a ripiani grigliati e possibilità di combinare ripiani-cassetti
- illuminazione interna
- refrigerazione ventilata
- sbrinamento automatico con evaporazione condensa



CI

130/270/370/440/530  
625/925/1160/1365

+2°C  
+50°C



CI 370/440/530/625

**COOLED INCUBATORS  
INCUBATEURS RÉFRIGÉRÉS  
INCUBATORI REFRIGERATI**

**Cooled incubators CI range:**

- 2 versions, steel epoxy coated white colour or stainless steel
- 8 models with capacities from 130 to 1365 litres
- solid doors realized with the same insulation and material as the structure
- PRO control
- internal fitting with open wire shelves and mix-up possibility shelves-drawers
- internal lighting
- forced-air refrigeration
- automatic defrost with evaporation of condensate water
- temperature until +50°C

**Incubateurs réfrigérés série CI:**

- 2 versions, tôle d'acier plastifiée blanche ou acier INOX
- 8 modèles, disponibles avec capacités de 130 à 1365 litres
- portes pleines, réalisées avec le même matériel de la structure
- contrôle PRO
- équipement intérieur à clayettes en fil et possibilité de combiner clayettes-tiroirs
- éclairage intérieur
- réfrigération ventilée
- dégivrage automatique avec évaporation condensats
- température jusqu'à +50°C

**Incubatori refrigerati serie CI:**

- 2 versioni, lamiera d'acciaio plastificata bianca o acciaio INOX
- 8 modelli, disponibili con capacità da 130 a 1365 litri
- porte isolate, realizzate con lo stesso materiale della struttura
- controllo PRO
- dotazione interna a ripiani grigliati e possibilità di combinare ripiani-cassetti
- illuminazione interna
- refrigerazione ventilata
- sbrinamento automatico con evaporazione condensa
- temperatura fino a +50°C

**PLATELET INCUBATORS  
INCUBATEURS DE PLAQUETTES  
INCUBATORE PER PIASTRINE**

PI

110V/110H

+22°C



**Platelet incubators PI range:**

- realized in steel epoxy coated white colour and stainless steel inside
- 2 models, with capacity 110 litres, for table-top or underbench installation
- triple layers, glass doors with full-height handle
- 2 levels for the control, standard and PRO
- internal electrical socket
- forced-air refrigeration
- temperature of +22°C

**Incubateurs de plaquettes série PI:**

- réalisées en tôle d'acier plastifiée blanche et acier INOX à l'intérieur
- 2 modèles, avec une capacité de 110 litres pour rangement sous pailasse ou sur pailasse
- portes vitrées à triple cristal avec poignée toute hauteur
- 2 niveaux de contrôle, standard et PRO
- prise interne
- réfrigération ventilée
- température de +22°C

**Incubatori piastrinici serie PI:**

- realizzati in lamiera d'acciaio plastificata bianca e acciaio INOX all'interno
- 2 modelli, con capacità di 110 litri per installazioni sopra o sotto banco
- porte vetrate a triplo cristallo con maniglia tutta altezza
- 2 livelli di controllo, standard e PRO
- presa elettrica interna
- refrigerazione ventilata
- temperatura di +22°C



PI 110V

# PRF

11/16/25/35  
40/50

+10°C  
-18°C

## PORTABLE REFRIGERATORS / FREEZERS RÉFRIGÉRATEURS / CONGÉLATEURS PORTABLES FRIGORIFERI / CONGELATORI PORTATILI

### 🇬🇧 Portable refrigerators-freezers PRF range:

- realized in shock-proof plastic material and aluminium inside
- 9 models with capacities from 11 to 50 litres
- digital-electronic temperature control
- internal fitting with wire basket (excluded mod. 11 and 16)
- internal lighting
- for voltages 12/24V DC and 110-230V/50-60Hz AC
- static refrigeration with compressor

### 🇫🇷 Réfrigérateurs/congérateurs portables série PRF:

- réalisés en matériel plastique antichoc et aluminium à l'intérieur
- 9 modèles, disponibles avec capacités de 11 à 50 litres
- régulation électronique/digitale de la température
- équipement intérieur à panier en fil d'acier plastifié (exclu mod. 11 et 16)
- éclairage intérieur
- pour voltages 12/24V et 110-230V/50-60Hz
- réfrigération statique à compresseur

### 🇮🇹 Frigo-congelatori portatili serie PRF:

- realizzati in materiale plastico anti-urto e alluminio all'interno
- 9 modelli, disponibili con capacità da 11 a 50 litri
- controllo elettronico-digitale della temperatura
- dotazione interna a cestello in filo d'acciaio plastificato (esclusi mod. 11 e 16)
- illuminazione interna
- per voltaggi 12/24V e 110-230V/50-60Hz
- refrigerazione statica a compressore

PRF 16P

PRF 11P

## ISOTHERMAL CONTAINERS GLACIÈRES ISOTHERMES CONTENITORI TERMICI

# IC

13/22/42/55/70  
85/110

### 🇬🇧 Isothermal containers IC range:

- realized in shock-proof plastic material both in- and outside
- 7 models with capacities from 13 to 110 litres
- high density polyurethane foam insulation for a prolonged holding time of the temperature
- insulated lid realized with the same insulation and material as the structure, with safety blocking mechanism

### 🇫🇷 Glacières isothermes série IC:

- réalisées en matériel plastique antichoc soit à l'intérieur qu'à l'extérieur
- 7 modèles, disponibles avec capacités de 13 à 110 litres
- isolation avec polyuréthane à haute densité pour garder la température
- couvercle isolé, réalisé avec le même matériel de la structure, avec blocage de sécurité

### 🇮🇹 Contenitori isotermici serie IC:

- realizzati in materiale plastico anti-urto sia all'esterno che all'interno
- 7 modelli, disponibili con capacità da 13 a 110 litri
- isolamento con poliuretano ad alta densità per prolungare la tenuta della temperatura
- coperchio isolato, realizzato con lo stesso materiale della struttura, con chiusura di sicurezza

IC 42

IC 13



# EPRF C

+10°C  
-24°C

## 🇬🇧 Portable refrigerators/freezers EPRF range:

- realized in shock-proof plastic material outside and aluminium inside
- 4 models with capacities from 22 to 82 litres
- digital-electronic temperature control with visual and acoustic alarm
- choice between fridge-freezer temperature range (C version) or extended (HC version)
- for voltages 12/24V DC and 110-230V/50-60Hz AC
- static refrigeration with compressor

## 🇫🇷 Réfrigérateurs/congérateurs portables série EPRF:

- réalisés en matériel plastique antichoc à l'extérieur et aluminium à l'intérieur
- 4 modèles, disponibles avec capacités de 22 à 82 litres
- régulation électronique/digitale de la température avec alarme visuelle et acoustique
- choix en plage de température réfrigérateur/congérateur (version C) ou étendue (version HC)
- pour voltages 12/24V et 110-230V/50-60Hz
- réfrigération statique à compresseur



EPRF 22



EPRF 32



EPRF 56



EPRF 82

# PORTABLE REFRIGERATORS / FREEZERS RÉFRIGÉRATEURS / CONGÉLATEURS PORTABLES FRIGORIFERI / CONGELATORI PORTATILI

# EPRF HC

+40°C  
-24°C

## 🇮🇹 Frigo-congelatori portatili serie EPRF:

- realizzati in materiale plastico anti-urto all'esterno e alluminio all'interno
- 4 modelli, disponibili con capacità da 22 a 82 litri
- controllo elettronico-digitale della temperatura con allarme acustico e visivo
- scelta di range di temperatura frigo-freezer (versione C) o esteso (versione HC)
- per voltaggi 12/24V e 110-230V/50-60Hz
- refrigerazione statica a compressore



# FIM

60/90/95/140/150/250



## FLAKE ICE MAKERS MACHINES À GLACE EN PAILLETES PRODUTTORI DI GHIACCIO GRANULARE

### 🇬🇧 Flake ice makers FIM range:

- realized in stainless steel
- 5 models with automatic production, capacities from 60 to 250 Kg/24h
- built-in storage bin for ice reservoir, with stop when full
- air or water cooled cooling unit

### 🇫🇷 Machines à glace en paillettes série FIM:

- réalisées en acier INOX
- 5 modèles, avec production automatique de 60 à 250 Kg/24h
- bac de stockage incorporé avec arrêt au plein
- refroidissement à air ou à eau

### 🇮🇹 Produttori di ghiaccio granulare serie FIM:

- realizzati in acciaio INOX
- 5 modelli, con produzione automatica da 60 a 250 Kg/24h
- contenitore riserva-ghiaccio incorporato con fermo pieno
- raffreddamento ad aria o acqua



FIM 90

## CUBER ICE MAKERS MACHINES À GLAÇONS CUBES PRODUTTORI DI GHIACCIO A CUBETTI

# CIM

18/20/24/28/33/42  
46/65/80



### 🇬🇧 Cuber ice makers CIM range:

- realized in stainless steel
- 9 models with automatic production, capacities from 18 to 90 Kg/24h
- built-in storage bin for ice reservoir, with stop when full
- air or water cooled cooling unit

### 🇫🇷 Machines à glaçons cubes série CIM:

- réalisées en acier INOX
- 9 modèles, avec production automatique de 18 à 90 Kg/24h
- bac de stockage incorporé avec arrêt au plein
- refroidissement à air ou à eau

### 🇮🇹 Produttori di ghiaccio a cubetti serie CIM:

- realizzati in acciaio INOX
- 9 modelli, con produzione automatica da 18 a 80 Kg/24h
- contenitore riserva-ghiaccio incorporato con fermo pieno
- raffreddamento ad aria o acqua



CIM 24

# MMC

1/2/3/4/6/9

0°C  
+12°C

-5°C  
-20°C



## Modular mortuary chambers MMC range:

- 2 versions, steel epoxy coated white colour or stainless steel
- 6 models with capacities from 1 to 9 bodies
- solid doors, individual for each body-tray or multiple trays, realized with the same insulation and material as the structure
- stainless steel internal fittings with extractable sliding body trays
- forced-air refrigeration
- automatic defrost with evaporation of condensate water
- positive or negative temperature available

## Chambres mortuaires modulaires série MMC:

- 2 versions, tôle d'acier plastifiée blanche ou acier INOX
- 6 modèles, disponibles avec capacités de 1 à 9 corps
- portes ou portillons, réalisés avec le même matériel de la structure
- équipement intérieur en acier INOX avec civières extractibles coulissantes
- réfrigération ventilée
- dégivrage automatique avec évaporation condensats
- température positive ou négative

## MODULAR MORTUARY CHAMBERS CHAMBRES MORTUAIRES MODULAIRES CAMERE MORTUARIE MODULARI

## Camere mortuarie modulari serie MMC:

- 2 versioni, lamiera d'acciaio plastificata bianca o acciaio INOX
- 6 modelli, disponibili con capacità da 1 a 9 corpi
- porte o sportelli, realizzati con lo stesso materiale della struttura
- dotazione interna in acciaio INOX con barelle estraibili a scorrimento
- refrigerazione ventilata
- sbrinamento automatico con evaporazione condensa
- temperatura positiva o negativa



MMC 1.1

MMC 2.2



MMC 4.4



MMC 3.3



MMC 9.3

## COMPLEMENTARY AUTOPSY EQUIPMENTS EQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES POUR L'AUTOPSIE ARTICOLI DA AUTOPSIA COMPLEMENTARI

### Complementary mortuary equipment CAE range:

- trolleys for the body transportation and autopsy tables
- 3 models of trolleys, from the simple for the bodies moving to the ones with lifting mechanism for the body-trays (manual or electric)
- 3 models of autopsy tables, from the most simple for the body observation to the professional tables

### Equipment mortuaire complémentaire série CAE:

- Chariots pour le transport de corps et tables d'autopsie
- 3 modèles de chariots, pour le simple déplacement ou le soulèvement de la civière (manuel ou électrique)
- 3 modèles de tables d'autopsie, du plus simple table d'observation corps aux tables professionnelles

### Articoli mortuari complementari serie CAE:

- carrelli trasporto salme e tavoli autoptici
- 3 modelli di carrelli trasporto salme, per il semplice spostamento o il sollevamento della barella, idraulico-manuale o elettro-idraulico
- 3 modelli di tavoli autoptici, dal semplice tavolo di sosta salma ai tavoli professionali

CAE 2

CAE 1

## MODULAR REFRIGERATING CHAMBERS CHAMBRES FROIDES MODULAIRES CELLE FRIGORIFERE MODULARI

+2°C  
 +12°C

-5°C  
 -20°C

# MRC MFC

### Walk-in cold and freezing chambers MRC and MFC range:

- modular, available in an unlimited selection of constructive solutions for dimensions and heights
- 2 versions, steel epoxy coated white colour or stainless steel
- high density polyurethane foam insulation (sandwich type) with available thicknesses of 70 or 100 mm
- doors available with different solutions, all provided with key locking and safety opening from inside
- cooling units available in a wide range of models with a selection of mounting possibilities among: wall-hanged, roof or remote
- positive or negative temperature available

### Chambres froides série MRC et MFC:

- modulaires avec une série illimitée de solutions constructives en dimensions et hauteurs
- 2 versions, tôle d'acier plastifiée blanche ou acier INOX
- isolation avec polyuréthane à haute densité, avec épaisseur de 70 ou 100 mm
- portes avec solutions différentes de passage, dotées de serrure et ouverture de sécurité interne
- unités de refroidissement disponibles en une large gamme de modèles à choix: à parois, à plafond ou split
- température positive ou négative

### Celle refrigerate serie MRC e MFC:

- modulari per una serie illimitata di soluzioni costruttive per dimensioni ed altezze
- 2 versioni, lamiera d'acciaio plastificata bianca o acciaio INOX
- isolamento con poliuretano ad alta densità, con spessore di 70 o 100 mm
- porte con diverse soluzioni di passaggio, provviste di serratura e apertura di sicurezza interna
- unità refrigeranti disponibili in un'ampia gamma di modelli con montaggio a scelta: a parete, a soffitto o remoto
- temperatura positiva o negativa







• Should it be necessary or useful without undermining any model essential features, technical and stylistic characteristics are subject to be changed without manufacturer's previous notice. • La Maison constructrice se réserve le droit d'opérer sans préavis toutes modifications techniques et stylistiques qu'elle considerera nécessaires ou utiles sans compromettre les caractéristiques essentielles des produits. • La ditta fornitrice si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. • Der Hersteller behält sich das Recht vor, alle technischen und das Aussehen betreffenden Änderungen vorzunehmen, die er für nützlich oder nötig hält, ohne die wesentlichen Merkmale der Erzeugnisse zu ändern.



ISO 9001:2015

EN ISO 13485:2016

**EVERmed**  
MEDICAL REFRIGERATION 

**EVERmed s.r.l.** • Via Galileo Galilei 2, 46020 Motteggiana (MN) - ITALY  
Tel. +39 0376 550828 • Fax +39 0376 550831 • <http://www.evermed.it> • mail: [evermed@evermed.it](mailto:evermed@evermed.it)



CAT0003/C