

ASAL S.R.L. - APPARECCHI SCIENTIFICI ATTREZZATURE LABORATORI

**Azienda con sistema di gestione qualità conforme ai requisiti della norma
UNI EN ISO 9001:2008. Certificato TÜV Italia n° 50 100 3290 – Rev. 04**

FORNO A MUFFOLA

**MOD. ZB 1
COD. 29920001
CODICE CIVAB MUFASATB**

**MOD. ZB 2
COD. 29920002
CODICE CIVAB MUFASAM2**



Questo apparato è stato progettato, costruito e testato secondo la Direttiva Europea 2004/108/CE (compatibilità elettromagnetica EMC), alla Direttiva Europea 2006/95/CE (bassa tensione BT) e alla norma CEI EN 61010-1 e CEI EN 61010-2-010.

ASAL s.r.l. Via Firenze n° 37 - 20063 Cernusco s/N (MI) - Italy
Tel. +39 02/92.10.23.34 - Fax +39 02/92.10.48.66
Http://www.asal.it – e-mail: info@asal.it

Ci riserviamo il diritto di apportare senza preavviso tutte le modifiche necessarie per il miglioramento del prodotto

DESCRIZIONE

Il Forno a muffola mod. ZB/1 – ZB/2 è normalmente impiegato nel settore meccanico per il trattamento degli acciai, nel settore orafa dentale per la cottura dei rivestimenti, nel settore dell'industria chimica (laboratori), del vetro e della ceramica.

Muffola riscaldante, sfilabile dal retro, in gettata unica di materiale refrattario cordielitico per sopperire agli sbalzi termici. Resistori in KANTHAL schermati.

Porta a bandiera con cuneo di pressione e dispositivo di arresto dell'alimentazione elettrica alla sua apertura che consente all'operatore, durante il carico e scarico della muffola, di agire con la massima sicurezza, evitando il contatto con la parte rovente.

Scarico posteriore dei fumi a tiraggio naturale.


Pannello di comando e di controllo con un termoregolatore elettronico digitale visualizzato. Temperatura max. 1100° C.

CARATTERISTICHE

ART.	Dimensioni interne in cm. LxPxA	Dimensioni esterne in cm. LxPxA	Peso Kg	Temp. max	Watt
ZB 1	14.5x25x10 (3.5 Lt.)	40x58x55	40	1100 ±1°C	2300
ZB 2	21x28x14.5 (8.5 Lt.)	50x65x65	76	1100 ±1°C	3600

- ◆ Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz.
- ◆ Cavo di alimentazione


ELENCO PARTI

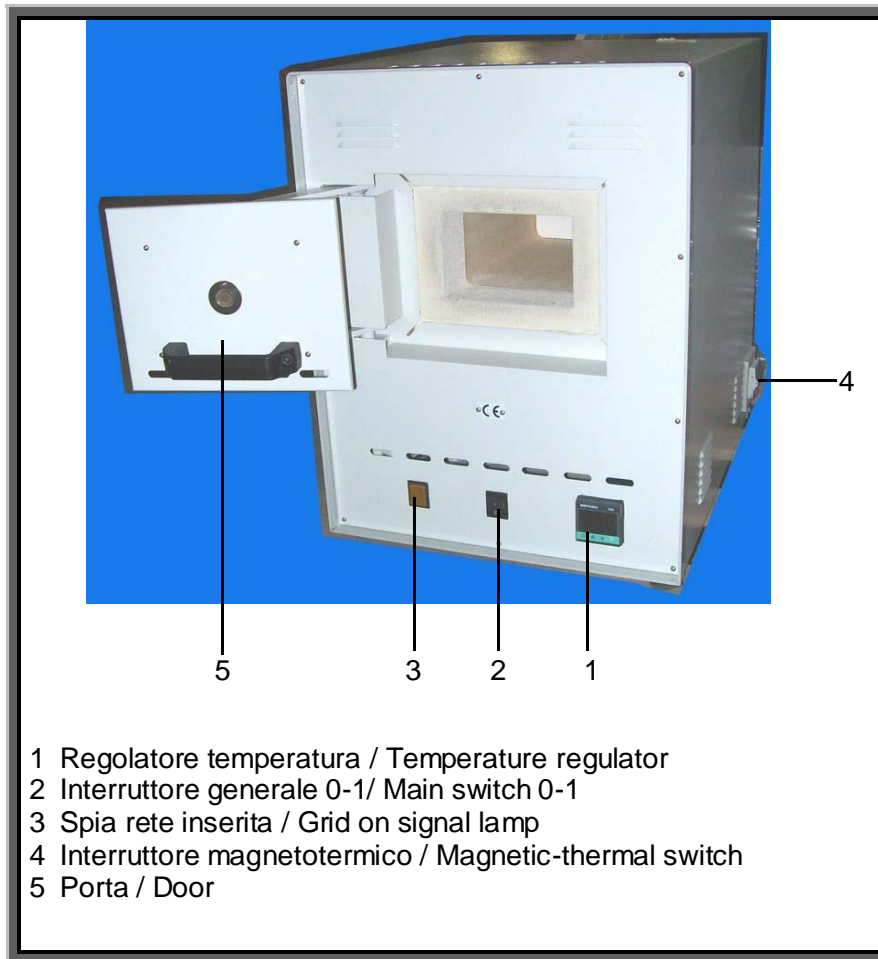

ACCESSORI

Timer: programmazione con timer.

Il forno è predisposto da un interruttore che agisce in Manuale (esclusione del timer) o in Automatico (inserimento del timer).

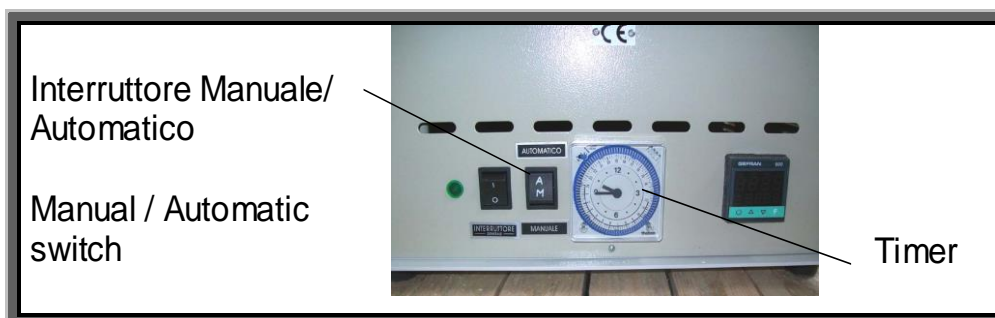

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY**



Il sottoscritto in qualità di fabbricante dichiara che l'apparecchio
The under written as manufacturer declares that the unit

Denominazione apparecchio / Description:
FORNO A MUFFOLA / MUFFLE OVEN

Modello / Model:

ZB 1 – ZB 2

Numero di serie / Serial number:

Alimentazione / Power supply:

230V - 50 Hz

Grado di protezione / Protection grade:

I°

Assorbimento / Electrical input:

ZB 1: 2300 W

ZB 2: 3600 W

Anno di fabbricazione / Manufacture year:

è conforme alle seguenti Direttive Europee /
it is in conformity with the following European Directives:
2006/95/CE, 2004/108/CE, 2006/42/CE

alla seguente Norma Europea / *with the following european standard:*
CEI EN 61010-1 e CEI EN 61010-2-010

alle seguenti Leggi Nazionali / *with the following National Laws:*
D.Lgs. 81/08 del 09/04/2008, D.lgs 14 Marzo 2014, n. 49
(attuazione della Direttiva RAEE 2012/19/CE)

Responsabile della costituzione del fascicolo tecnico /
technical file responsible:

**sig. Alberto Tivelli presso ASAL s.r.l, via Firenze 37 20063 Cernusco S/N (MI),
e-mail: info@asal.it**

Cernusco sul Naviglio, / /

ASAL s.r.l
Il Legale Rappresentante
The legal Representative
Elisa Tivelli

